

Ficha Técnica – Algodão Ortopédico Undercast Pad


Cadastro ANVISA: MS 81606090005

Marca / Modelo fabricante: Pharma-Undercast

Fabricante: Pharmaplast

Representação gráfica

Fibras acrílicas

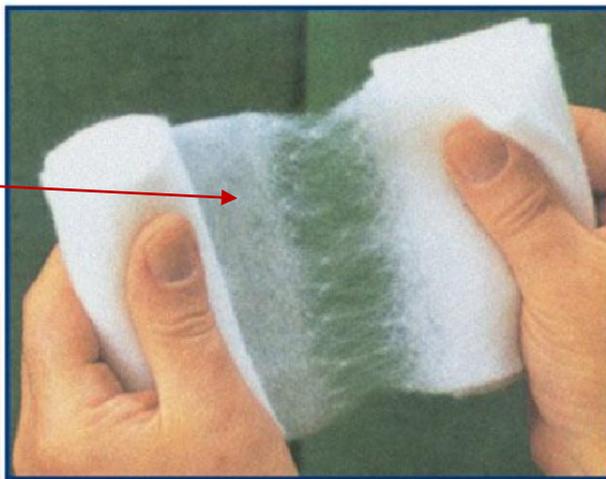

Descrição

Compressa ortopédica sintética não estéril. Fabricado de uma mistura de poliéster e fibra acrílica. Enrolado e cortado sem núcleos, em diferentes larguras e comprimentos. Excelente conformabilidade. Fácil de rasgar. Pode ser esterilizado em autoclave. Bom amortecimento e macio. Devido à excelente conformabilidade permite uma cobertura uniforme e um acabamento suave. Capacidade de absorção de $\geq 1100\%$.

Apresentação Comercial

Embalagem primária em grau cirúrgico.

Embalagem secundária em caixa de papelão.

Possui os seguintes modelos comerciais:

Códigos	Dimensões
Cast 5027	5cm X 2,7m
Cast 7527	7,5cm X 2,7m
Cast 1027	10cm X 2,7m
Cast 1527	15cm X 2,7m
Cast 2027	20cm X 2,7m

Indicação

Acolchoamento para proteção de fraturas ósseas, partes traumatizadas e problemas ortopédicos em geral.

Contraindicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.


Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte:

- Precauções:** O produto não se destina para uso em cavidades internas do corpo. Se houver desenvolvimento de infecção durante o uso do curativo, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável.
- Restrições:** Não se aplica.

- c) **Advertências:** Produto não estéril em rolo, pode ser recortado no tamanho desejado. Proibido reprocessar após o uso.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instrução de uso

O Undercast Pad pode ser esterilizado em autoclave antes do uso. Limpar e secar a pele no local desejado. Cortar o algodão no comprimento desejado. Iniciar o enfaixamento pela parte distal do membro sobrepondo as camadas. Deve ser aplicada antes da atadura gessada ou outra cobertura.

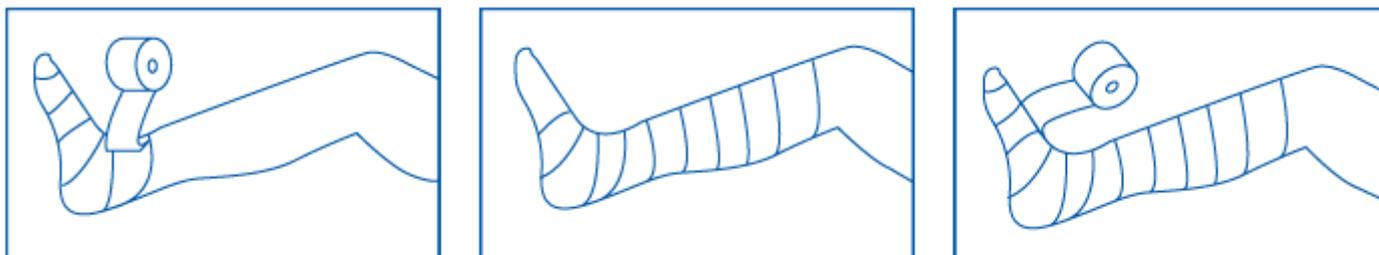

Segurança e eficácia

O teste de Bioburden é realizado rotineiramente pelo fabricante, em cada lote, para monitoramento nas amostras dos produtos de acordo com a norma ISO 11737-1. Bioburden (carga microbiana) é definido como o número de microrganismos presentes em uma superfície que não tenha sido esterilizada.

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.
Armazenar abaixo de 25 ° C.
Evite qualquer choque térmico.

Prazo de validade

Prazo de validade de 5 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Fabricante: Pharmaplast S.A.E.
Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria,
Egypt, Zipcode: 37.23512

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME
Avenida Barão Homem de Melo 4500 Salas 1122/1123 – Estoril –
Belo Horizonte/MG | CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619
comercial@goldmedimport.com.br | CNPJ: 28.215.470/0001-91
Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120